

## 小鼠脾脏单个核细胞分离液试剂盒

规格：3×200 mL/kit


保存：本产品对光敏感，应该室温避光储存，保质期 2 年。无菌开封后，保存于室温。

组成：

|                |       |
|----------------|-------|
| 各种动物脾脏单个核细胞分离液 | 200mL |
| 全血及组织稀释液       | 200mL |
| 细胞洗涤液          | 200mL |

### 单个核细胞分离方法

1. 制备脾脏的单细胞悬液。
2. 取一支适当的离心管，加入与脾脏单细胞悬液等量的分离液（分离液最少不得少于3 mL，总体积不能超过离心管的三分之二，否则会影响分离效果）。
3. 小心吸取单细胞悬液加于分离液液面上，注意保持两液面界面清晰。（可以使用巴氏德吸管吸取单细胞悬液，然后小心的平铺于分离液上，因为两者的密度差异，将形成明显的分层界面。）
4. 室温，500~900g，离心20~30min。（根据脾脏单细胞悬液量确定离心条件，单细胞悬液量越大，离心力越大，离心时间越长，具体离心条件可以自行摸索，以达到最佳分离效果）。
5. 离心后，此时离心管中由上至下细胞分四层。第一层为稀释液层；第二层为环状乳白色单个核细胞层；第三层为透明分离液层；第四层为红细胞层。
6. 用吸管小心吸取第二层环状乳白色单个核细胞层至另一洁净的15mL离心管中，向离心管中加入10ml细胞洗涤液洗涤白膜层细胞，250g，离心10min。
7. 弃上清，5mL的PBS或细胞清洗液重悬细胞，250g，离心10min。
8. 重复步骤7
9. 弃上清，细胞重悬备用。

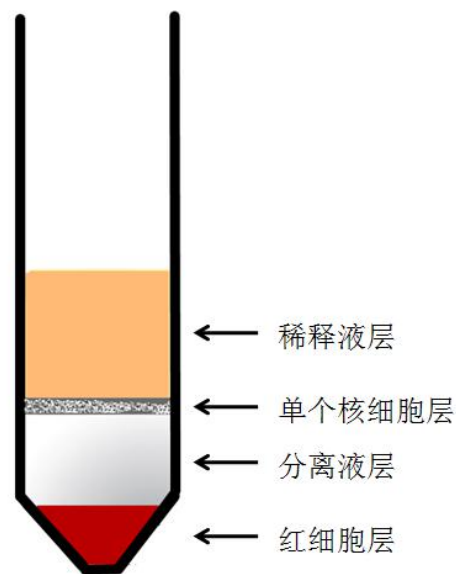

分层示意图

### 脾脏单细胞悬液的制备方法

脾脏研磨的方法：

1. 无菌条件下摘取脾脏，撕去脾脏被膜，用眼科剪将脾脏剪成小块。
2. 将尼龙筛网或者是细胞过滤筛放置于平皿上，加入少量全血及组织稀释液（保证脾脏及获得的细胞处于液体环境中）。
3. 将脾脏放置于筛网上，使用注射器活塞或者是无菌镊子来研磨脾脏（尽量控制研磨力度，保持筛网悬空，避免在皿底上直接研磨而造成大批细胞死亡）
4. 研磨完全后使用全血及组织稀释液冲洗筛网，收集细胞悬液，再经滤网过滤。

#### 注:

- A. 可用酶消化法, 使用胶原酶对脾脏组织进行消化, 得到单细胞悬液。
- B. 如果最终得到的细胞需要培养, 那全过程所需试剂与器材均要求无菌。
- C. 根据脾脏的体积控制单细胞悬液的浓度在 $10^8 \sim 10^9$ 个/mL。

#### 注意事项:

- A. 开封前颠倒混匀, 本分离液为无菌产品, 为延长分离液保存时间, 请在无菌条件下启封, 避免微生物污染。
- B. 分离液使用时应始终保持室温( $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ), 如室内温度较低, 可将分离液预热。 $4^{\circ}\text{C}$ 或者是温度较低条件下离心, 可能会导致白膜层中红细胞污染加重。
- C. 待分离的组织要求新鲜, 避免冷冻和冷藏。
- D. 部分塑料制品(如聚苯乙烯)因其带有的静电作用, 可能会导致细胞挂壁影响分离效果。
- E. 如果要进一步对分离的细胞进行培养, 那在制备单细胞悬液和分离过程中, 注意无菌操作, 避免微生物污染。

#### 参考文献:

1. Boyum A. Separation of leucocytes from blood and bone marrow. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 1968; 97: 7.
2. Ting A, Morris PJ. A technique for lymphocyte preparation from stored heparinized blood. Vox Sang. 1971 Jun; 20(6): 561-3.
3. Boyum A. Separation of Blood Leucocytes, Granulocytes and Lymphocytes Tissue Antigens. 1974; 4(4): 269-74.
4. Weisbart RH, Webb WF, Bluestone R, Goldberg LS. A simplified method for lymphocyte separation. Vox Sang. 1972; 23(5): 478-80.

#### 相关产品:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| R1018               | 细胞洗涤液                   |
| S9020               | 优级胎牛血清                  |
| R1017               | 全血及组织稀释液                |
| 31800               | RPMI Medium 1640        |
| T1300               | 胰蛋白酶—EDTA消化液(0.25%)不含酚红 |
| YA0902              | 一次性巴氏德吸管                |
| 各种其他动物及其他细胞的分离液及试剂盒 |                         |